



RUND UM BASIS

FAQ – Häufige Anwenderfragen

Thema: Stichverletzungsmodul




In BASIS 6 können Sie ab Version 6.0.15 Stichverletzungen gemäß TRBA 250 Anhang 6 dokumentieren und abrechnen.


Ein Stichverletzungsvorgang kann sich über 12 Monate erstrecken mit Laborkontrollen in regelmäßigen Abständen. **Alle diese Arztkontakte**, die zu einem Stichverletzungsereignis gehören, können in diesem **einen Vorgang** dokumentiert und abgerechnet werden. Es kann sich um die Dokumentation von eigenen Stichverletzungs-Erstaufnahmen handeln oder auch um die Übernahme von externen D-Arzt-Berichten, wenn die Beschäftigten zur Nachkontrolle zu Ihnen kommen.

Stichverletzungen können über den **Funktionskatalog** [1], die **Toolbar** [2], die **Globale Suche** [3] oder die **Buttons auf der Startseite** [4] aufgerufen werden.

Die Funktion „**Neue Stichverletzung**“ legt für einen auszuwählenden Beschäftigten einen neuen Stichverletzungsvorgang an.

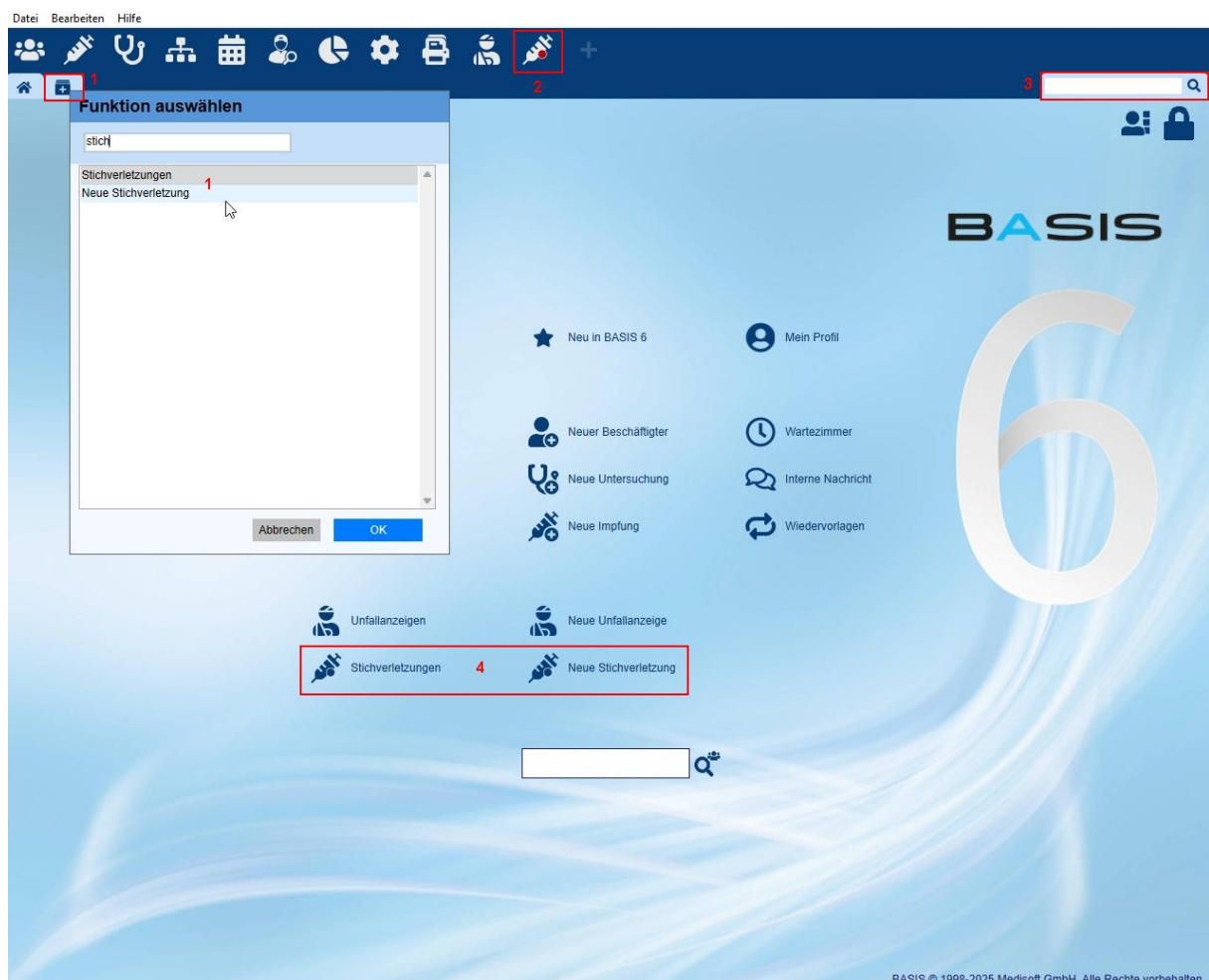


Alle Stichverletzungsvorgänge eines Beschäftigten [5] werden innerhalb der Beschäftigtenmaske in der **Navigation** angezeigt [6] und können mit einem Doppelklick angesehen oder bearbeitet werden.

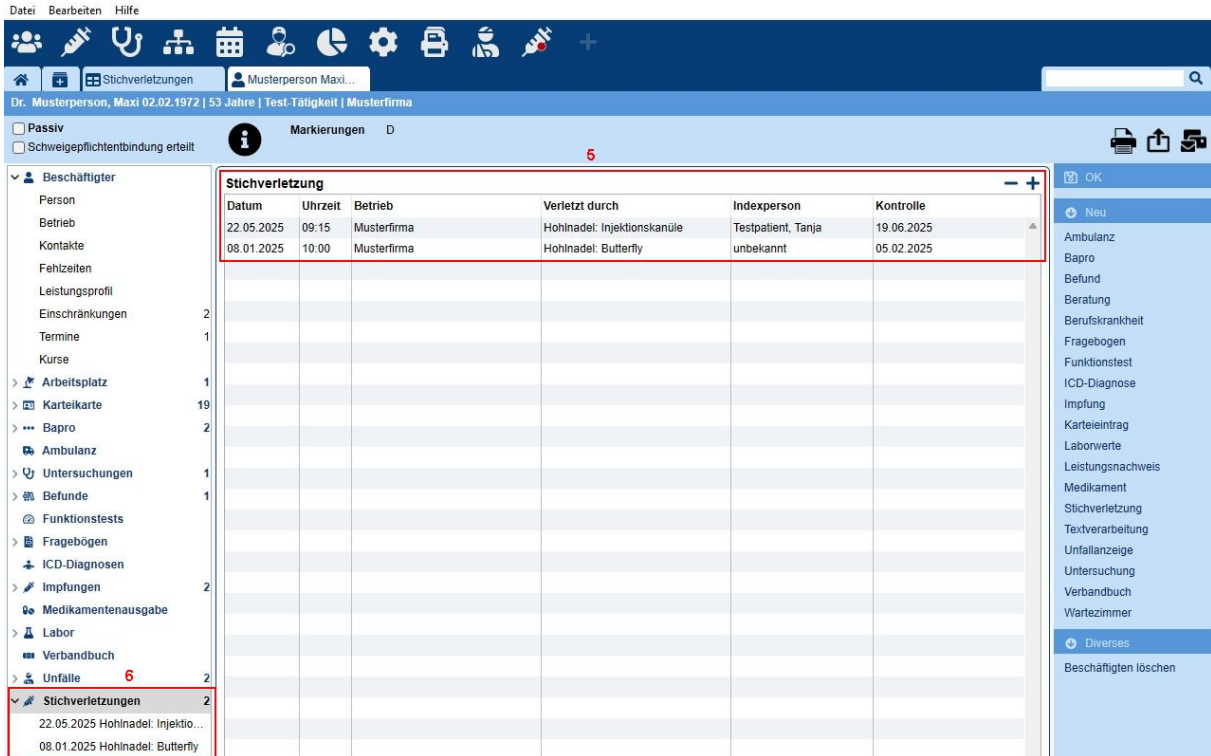

Datum	Uhrzeit	Betrieb	Verletzt durch	Indexperson	Kontrolle
22.05.2025	09:15	Musterfirma	Hohlnadel: Injektionskanüle	Testpatient, Tanja	19.06.2025
08.01.2025	10:00	Musterfirma	Hohlnadel: Butterfly	unbekannt	05.02.2025

Auch hier können Sie neue Stichverletzungen über das **Plus-Icon** oberhalb der Stichverletzungsliste [7] oder über die rechte **Blaue Button Leiste (BBL)** [8] anlegen.

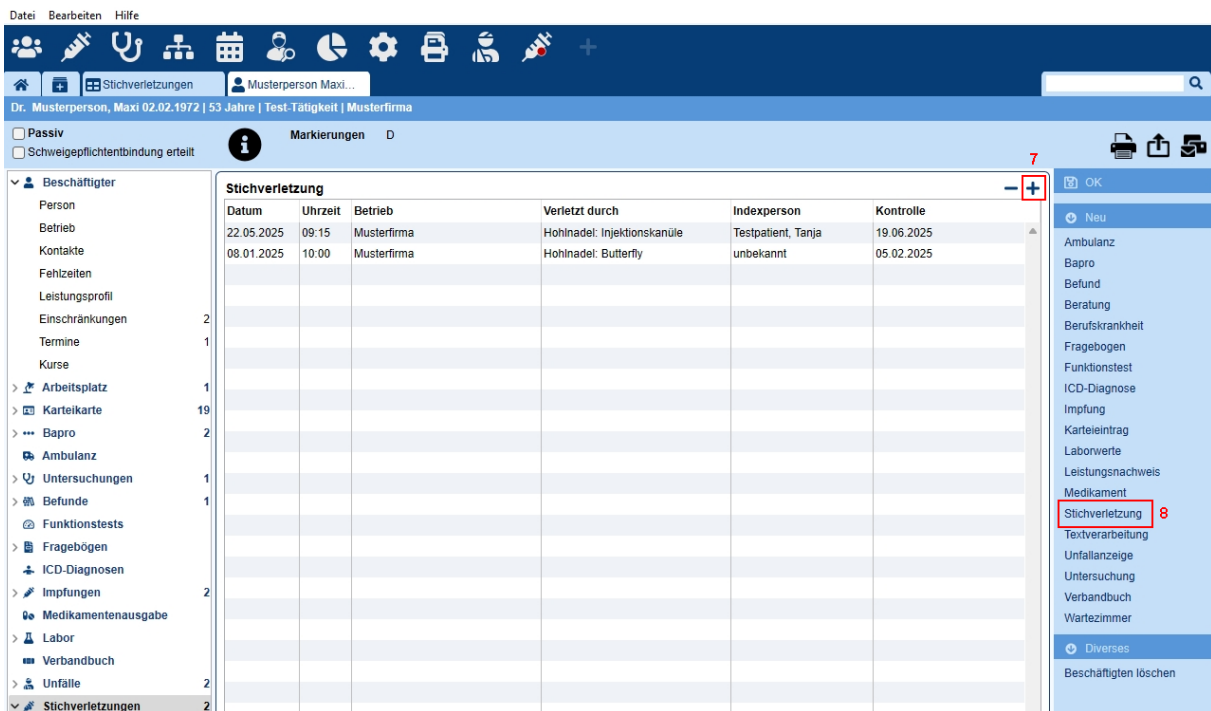


Bei neu angelegten Stichverletzungen werden einige Informationen bereits **vorausgefüllt**:

Zuständiger Arzt [9], Zeitpunkt des Ereignisses und Zeitpunkt der Meldung [10] werden mit dem aktuellen Datum und Uhrzeit befüllt, die Uhrzeit des Ereignisses wird bewusst noch leer gelassen.

Zum Unfallzeitpunkt ausgeführte Tätigkeit und Betrieb [11] in der Kopfzeile werden genauso wie Erlerner Beruf [12] aus den Angaben des Beschäftigten übernommen.

Angaben zur Persönlichen Schutzausrüstung mit Checkboxen für Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Herkunft des Materials und Unterweisung werden mit „Unbekannt“ [13] vorbelegt. Besonders für die Übertragung von fremden D-Arzt-Berichten, bei denen möglicherweise Informationen fehlen, ist diese Option passend.

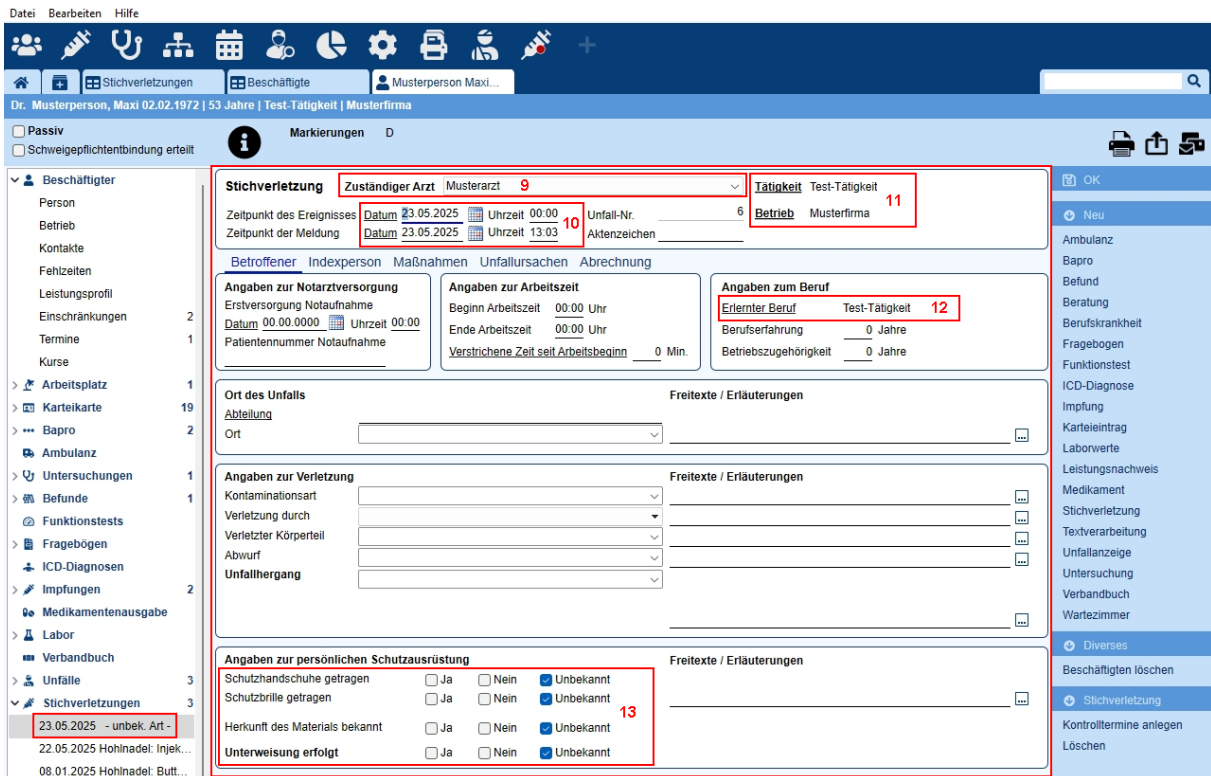

ACHTUNG !

Denken Sie daran, diese Angaben bei Bedarf zu korrigieren.

In der Stichverletzungs-Eingabemaske können Sie alle Eingaben nach TRBA 250 durchführen.

Im Kopf finden Sie Informationen, die Sie auf allen Reitern benötigen:

Zuständiger Arzt, Zeitpunkt des Ereignisses, Zeitpunkt der Meldung, Tätigkeit und Betrieb sowie ein **Aktenzeichen** [14] zur Identifizierung des Stichverletzungsvorgangs.

Stichverletzung	Zuständiger Arzt	Musterarzt	Tätigkeit	Entnehmen von Proben zur Diagnostik
Zeitpunkt des Ereignisses	Datum	23.05.2025	Uhrzeit	10:15
Zeitpunkt der Meldung	Datum	23.05.2025	Uhrzeit	13:03
	Unfall-Nr.	6	Betrieb	Musterfirma
	Aktenzeichen	AZ987654	14	

Im ersten **Reiter Betroffener** [15] können **Angaben zur Notarztversorgung** dokumentiert werden: Zeitpunkt der Erstversorgung in der Notaufnahme mit Patientenummer [16], **Angaben zur Arbeitszeit**: Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie die verstrichene Zeit seit Arbeitsbeginn in Minuten [17] und **Angaben zum Beruf**: Erlerner Beruf als Auswahlliste, Berufserfahrung in Jahren, Betriebszugehörigkeit in Jahren [18]

15 Betroffener	Indexperson	Maßnahmen	Unfallursachen	Abrechnung
Angaben zur Notarztversorgung	Angaben zur Arbeitszeit	Angaben zum Beruf		
Erstversorgung Notaufnahme 16	Beginn Arbeitszeit	07:00 Uhr	17	Erlerner Beruf
Datum 23.05.2025 Uhrzeit 10:30	Ende Arbeitszeit	17:00 Uhr		Chirurg*in 18
Patientennummer Notaufnahme 59876A	<u>Verstrichene Zeit seit Arbeitsbeginn</u>	195 Min.		Berufserfahrung
				10 Jahre
				Betriebszugehörigkeit
				5 Jahre

TIPP !

Unterstrichene Texte bieten beim Klicken immer Funktionen an.

Sofern der **Beginn der Arbeitszeit** und der **Zeitpunkt des Ereignisses** eingetragen wurden, kann mit Klick auf den unterstrichenen Text **Verstrichene Zeit seit Arbeitsbeginn** die Zeitdifferenz ausgerechnet und eingetragen werden.

Des Weiteren können hier Angaben zum **Ort des Unfalls** [19] gemacht werden. Neben den Dropdownlisten [20] gibt es Freitext-Felder für Erläuterungen [21].

Ein Klick auf die Box mit den drei Punkten neben den Freitext-Feldern [22] öffnet ein Text-Vergrößerungsfenster, in dem Sie bequemer und übersichtlicher Ihre Eingaben machen können.

Betroffener Indexperson Maßnahmen Unfallursachen Abrechnung

Angaben zur Notarztversorgung Erstversorgung Notaufnahme Datum 23.05.2025 Uhrzeit 10:30 Patientennummer Notaufnahme 59876A	Angaben zur Arbeitszeit Beginn Arbeitszeit 07:00 Uhr Ende Arbeitszeit 17:00 Uhr Verstrichene Zeit seit Arbeitsbeginn 195 Min.	Angaben zum Beruf Erlerner Beruf Chirurg*in Berufserfahrung 10 Jahre Betriebszugehörigkeit 5 Jahre
---	---	--

Ort des Unfalls 19 **Freitexte / Erläuterungen 21**

Abteilung Muster-Unterabteilung4
 Ort 20 ... 22

Angaben zur Verletzung
 Kontaminationsart
 Verletzung durch
 Verletzter Körperteil
 Abwurf
 Unfallhergang

Erläuterungen zum Unfallort

beim Blutentnahmeplatz

In den Freitext-Feldern ist genügend Platz, um alle benötigten Zusatzinformationen dokumentieren zu können.

23

Abbrechen OK

Angaben zur persönlichen Schutzaus
 Schutzhandschuhe getragen
 Schutzbrille getragen
 Herkunft des Materials bekannt
 Unterweisung erfolgt

TIPP!

In den Feldvergrößerungsfenstern können Sie Ihre eigenen vordefinierten Textkürzel nutzen.

Auch bei den **Angaben zur Verletzung** [24] gibt es Dropdown-Listen [25] und Freitexte für Erläuterungen.

Betroffener	Indexperson	Maßnahmen	Unfallursachen	Abrechnung
Angaben zur Notarztversorgung Erstversorgung Notaufnahme Datum <u>23.05.2025</u> Uhrzeit <u>10:30</u> Patientennummer Notaufnahme <u>59876A</u>		Angaben zur Arbeitszeit Beginn Arbeitszeit <u>07:00</u> Uhr Ende Arbeitszeit <u>17:00</u> Uhr Verstrichene Zeit seit Arbeitsbeginn <u>195</u> Min.		Angaben zum Beruf Erlerner Beruf <u>Chirurg*in</u> Berufserfahrung <u>10</u> Jahre Betriebszugehörigkeit <u>5</u> Jahre
Ort des Unfalls Abteilung <u>Muster-Unterabteilung4</u> Ort <u>Zimmer 4</u>			Freitexte / Erläuterungen beim Blutentnahmeplatz	
Angaben zur Verletzung 24 Kontaminationsart Verletzung durch Verletzter Körperteil Abwurf Unfallhergang			Freitexte / Erläuterungen	
Auswahl bearbeiten 25				

TIPP !


Die Inhalte der Dropdown-Listen können Sie selbst festlegen [25].

Bei den **Angaben zur persönlichen Schutzausrüstung** [26] gibt es Checkboxen, die mit „Unbekannt“ [27] vorbelegt sind. Besonders für die Übertragung von fremden D-Arzt-Berichten, bei denen möglicherweise Informationen fehlen, ist diese Option passend.

Angaben zur persönlichen Schutzausrüstung 26			Freitexte / Erläuterungen	
Schutzhandschuhe getragen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Unbekannt	Es wurden keine Angaben zur PSA gemacht.
Schutzbrille getragen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Unbekannt 27	
Herkunft des Materials bekannt	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Unbekannt	
Unterweisung erfolgt	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Unbekannt	

Im dritten **Reiter Maßnahmen** [30] können die Erstversorgung [31] und spätere Maßnahmen beim Betriebsarzt [32] dokumentiert werden.

Hier können die **Folgetermine für Blutentnahmen** über Checkboxes [33] festgelegt werden, die das Datum vom Unfallzeitpunkt aus berechnen. Diese Daten können bei Bedarf manuell angepasst und direkt über die Funktion in der Blauen Button Leiste [34] in die **Terminablage des Kalenders** gestellt werden.

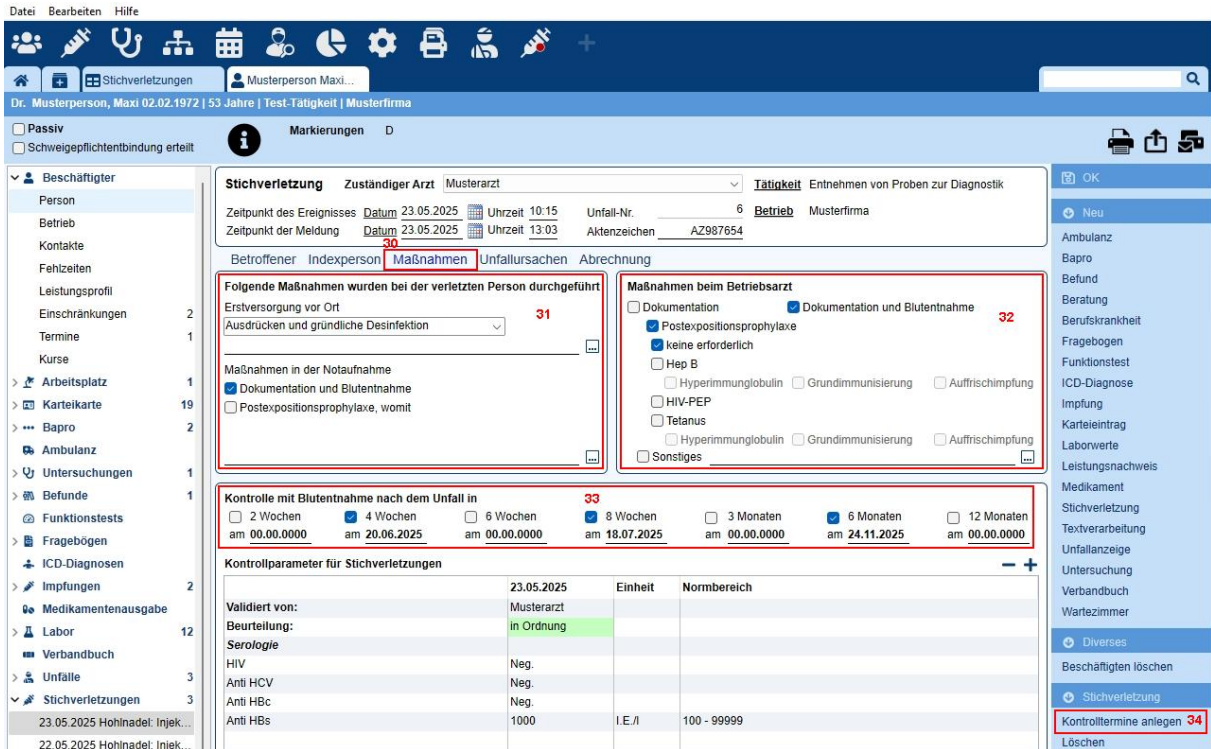

Stichverletzung Zuständiger Arzt: Musterarzt | Tätigkeit: Entnehmen von Proben zur Diagnostik

Zeitpunkt des Ereignisses Datum: 23.05.2025 Uhrzeit: 10:15 Unfall-Nr.: 6 Betrieb: Musterfirma
 Zeitpunkt der Meldung Datum: 23.05.2025 Uhrzeit: 13:03 Aktenzeichen: AZ987654

Betroffener: Indexperson | **Maßnahmen** | Unfallursachen | Abrechnung

Folgende Maßnahmen wurden bei der verletzten Person durchgeführt 31

Erstversorgung vor Ort: Ausdrücken und gründliche Desinfektion

Maßnahmen in der Notaufnahme: Dokumentation und Blutentnahme, Postexpositionsprophylaxe, womit

Maßnahmen beim Betriebsarzt 32

Dokumentation, Dokumentation und Blutentnahme, Postexpositionsprophylaxe, keine erforderlich, Hep B, Hyperimmunglobulin, Grundimmunisierung, Auffrischimpfung, HIV-PEP, Tetanus, Sonstiges

Kontrolle mit Blutentnahme nach dem Unfall in 33

2 Wochen am 00.00.0000, 4 Wochen am 20.06.2025, 6 Wochen am 00.00.0000, 8 Wochen am 18.07.2025, 3 Monaten am 00.00.0000, 6 Monaten am 24.11.2025, 12 Monaten am 00.00.0000


Kontrollparameter für Stichverletzungen			
	23.05.2025	Einheit	Normbereich
Validiert von:	Musterarzt		
Beurteilung:	in Ordnung		
Serologie			
HIV	Neg.		
Anti HCV	Neg.		
Anti HBc	Neg.		
Anti HBs	1000	I.E./l	100 - 99999

Kontrolltermine anlegen 34

TIPP!

Die hier festgelegten Kontrolldaten können in der Textverarbeitung im Brief an den Beschäftigten ausgegeben werden.

Bereits durchgeführte importierte oder manuell eingegebene **Labor-Ergebnisse** werden in der Tabelle [35] aufgelistet. Damit in diese Tabelle übersichtlich bleibt und nicht sämtliche Werte [36], die mit Stichverletzungen gar nichts zu tun hatten, hier zu sehen sind, werden nur für Stichverletzungen relevante Parameter hier angezeigt. Diese definieren Sie in der **Datenpflege | Parameter** [37], indem Sie dort die Checkbox setzen „**Anzeige bei Stichverletzungen**“ [38]. Nur die so gekennzeichneten Parameter werden also in dieser Tabelle [35] angezeigt.

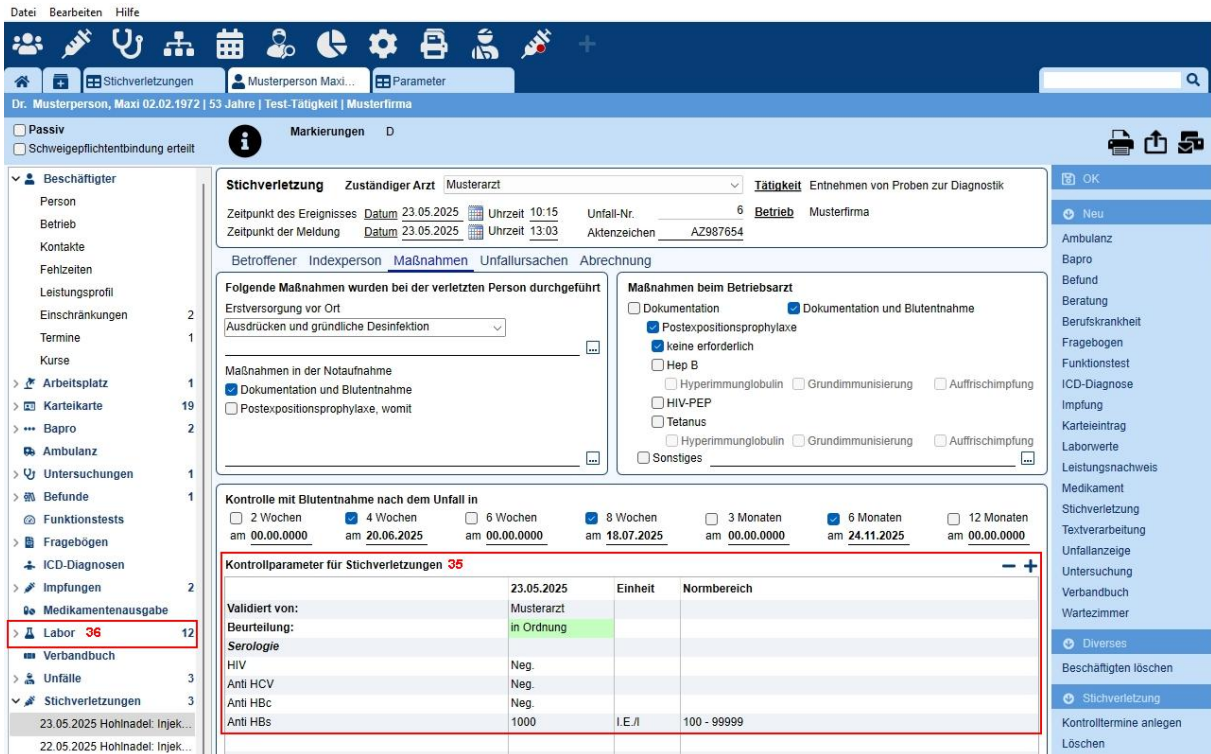

Stichverletzung Zuständiger Arzt: Musterarzt Tätigkeit: Entnehmen von Proben zur Diagnostik


Zeitpunkt des Ereignisses Datum: 23.05.2025 Uhrzeit: 10:15 Unfall-Nr.: 6 Betrieb: Musterfirma
 Zeitpunkt der Meldung Datum: 23.05.2025 Uhrzeit: 13:03 Aktenzeichen: AZ987654

Folgende Maßnahmen wurden bei der verletzten Person durchgeführt
 Erstversorgung vor Ort: Ausdrücken und gründliche Desinfektion

Maßnahmen beim Betriebsarzt
 Dokumentation Dokumentation und Blutentnahme
 Postexpositionsprophylaxe keine erforderlich
 Hep B Hyperimmunglobulin Grundimmunisierung Auffrischimpfung
 HIV-PEP Tetanus Hyperimmunglobulin Grundimmunisierung Auffrischimpfung
 Sonstiges

Kontrolle mit Blutentnahme nach dem Unfall in
 2 Wochen am 00.00.0000 4 Wochen am 20.06.2025 6 Wochen am 00.00.0000 8 Wochen am 18.07.2025 3 Monaten am 00.00.0000 6 Monaten am 24.11.2025 12 Monaten am 00.00.0000

Kontrollparameter für Stichverletzungen 35			
Validiert von:	23.05.2025	Einheit	Normbereich
Beurteilung:	in Ordnung		
Serologie			
HIV	Neg.		
Anti HCV	Neg.		
Anti HbC	Neg.		
Anti HbS	1000	I.E./l	100 - 99999

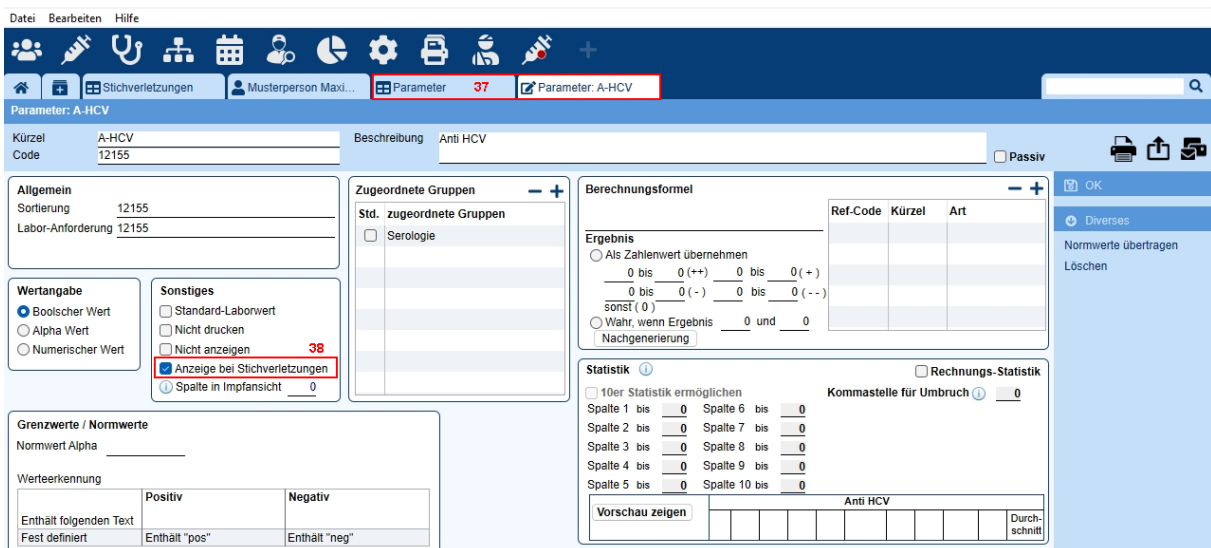

Parameter: A-HCV Beschreibung: Anti HCV

Kürzel: A-HCV Code: 12155

Allgemein
 Sortierung: 12155 Labor-Anforderung: 12155

Wertangabe
 Boolescher Wert Alpha Wert Numerischer Wert

Sonstiges
 Standard-Laborwert Nicht drucken Nicht anzeigen 38 Anzeige bei Stichverletzungen Spalte in Impfsicht: 0

Zugeordnete Gruppen
 Std. zugeordnete Gruppen: Serologie

Berechnungsformel
 Ergebnis: Als Zahlenwert übernehmen (0 bis 0(++), 0 bis 0(+), 0 bis 0(-), 0 bis 0(--)) Wahr, wenn Ergebnis 0 und 0 Nachgenerierung

Statistik
 10er Statistik ermöglichen Rechnungs-Statistik
 Spalte 1 bis 0 Spalte 6 bis 0
 Spalte 2 bis 0 Spalte 7 bis 0
 Spalte 3 bis 0 Spalte 8 bis 0
 Spalte 4 bis 0 Spalte 9 bis 0
 Spalte 5 bis 0 Spalte 10 bis 0

Grenzwerte / Normwerte
 Normwert Alpha: _____
 Werteerkennung:

Enthält folgenden Text	Positiv	Negativ
Fest definiert	Enthält "pos"	Enthält "neg"

Im Reiter **Unfallursachen** [39] können als **Checkliste** [40] von der TRBA 250 Anhang 6 vordefinierte mögliche Ursachen ausgewählt werden, wobei eine Mehrfachauswahl möglich sein soll. Ergänzend dazu **Freitext** für weitere Gründe oder Erläuterungen [41].

Die **Maßnahmen**, die solche Unfälle zukünftig verhindern können [42], sind laut TRBA 250 Anhang 6 gegliedert in verschiedene Kategorien: **Technisch** [43], **organisatorisch** [44], **persönlich** [45] und **sonstige** [46]. Hier kann Freitext eingegeben werden, wiederum mit Hilfe der Vergrößerungsboxen und Textkürzeln.

Stichverletzung Zuständiger Arzt: Musterarzt **Tätigkeit**: Entnehmen von Proben zur Diagnostik

Zeitpunkt des Ereignisses: Datum: 23.05.2025 Uhrzeit: 10:15 Unfall-Nr.: 6 **Betrieb**: Musterfirma

Zeitpunkt der Meldung: Datum: 23.05.2025 Uhrzeit: 13:03 Aktenzeichen: AZ987654

39

Betroffener Indexperson Maßnahmen Unfallursachen Abrechnung

Mögliche Unfallursachen ⌵

Zeitdruck Mehrfachnennung möglich

40 Ablenkung durch Umgebungsfaktoren

Störung durch andere Personen

Unerwartete Bewegung des Patienten

Arbeitsumfeld: technische oder organisatorische Mängel, räumliche Beengtheit

Müdigkeit

Überlastung

Mangelnde Schulung / Kenntnis der Anwendung

41 Sonstiges: ⋮

Abhilfe kann geschaffen werden durch folgende Maßnahmen **42**

43 Technisch: ⋮

44 Organisatorisch: ⋮

45 Persönlich: ⋮

46 Sonstiges: ⋮

Sofern der Benutzer Berechtigungen für Leistungen / Rechnungen hat, ist der fünfte **Reiter Abrechnung** [47] zu sehen. Hat ein Benutzer zwar die Berechtigung für Leistungen, darf aber keine Preise sehen, dann ist der Reiter Abrechnung sichtbar, die Spalten und Felder mit Preisen aber ausgeblendet.

Die in den Voreinstellungen definierten **Leistungsprofile** [48] können hier ausgewählt oder mit Plus- und Minus-Icon [49] **freie Leistungen** aus dem Katalog hinzugefügt oder entfernt werden. Mit einem Doppelklick auf die entsprechende Leistung kann diese noch weiter angepasst werden. Damit wird nicht der Leistungskatalog verändert, sondern nur die hier erbrachte Leistung.

In der oberen **Tabelle abzurechnende Leistungen** [50] haben Sie einen Überblick über alle für diesen Stichverletzungsvorgang noch abzurechnende Leistungen.

Stichverletzung Zuständiger Arzt **Tätigkeit** Entnehmen von Proben zur Diagnostik

Zeitpunkt des Ereignisses **Datum** 23.05.2025 **Uhrzeit** 10:15 Unfall-Nr. 6 **Betrieb** Musterfirma

Zeitpunkt der Meldung **Datum** 23.05.2025 **Uhrzeit** 13:03 Aktenzeichen AZ987654

Betroffener Indexperson Maßnahmen Unfallursachen **Abrechnung 47**

Profil wählen 48 49

Abzurechnende Leistungen

Ziffer	Kürzel	Abrechnungsmodus	Rechnungsziel	Datum	Anz.	Wert	Steuer	Faktor	Summe	Buch
1	Beratung	Rechnung	Abrechnungsbetrieb	23.05.2025	1	4,66	M00	1,3	6,06	Stand
4382	Hepatitis A -Virus (IgG)	Rechnung	Abrechnungsbetrieb	23.05.2025	1	13,99	M00	1,15	16,09	Stand
50										
Σ 22,15 €										

In der unteren Tabelle [51] sind alle in diesem Vorgang bereits **abgerechneten Leistungen** mit Rechnungsnummer einzusehen.

Dr. Musterperson, Maxi 02.02.1972 | 53 Jahre | Test-Tätigkeit | Musterfirma

Stichverletzung

Zuständiger Arzt: Musterarzt | Tätigkeit: Entnehmen von Proben zur Diagnostik

Zeitpunkt des Ereignisses: Datum 23.05.2025 | Uhrzeit 10:15 | Unfall-Nr. 6 | Betrieb: Musterfirma

Zeitpunkt der Meldung: Datum 23.05.2025 | Uhrzeit 13:03 | Aktenzeichen: AZ987654

Betroffener | Indexperson | Maßnahmen | Unfallursachen | **Abrechnung**

Abzurechnende Leistungen

Ziffer	Kürzel	Abrechnungsmodus	Rechnungsziel	Datum	Anz.	Wert	Steuer	Faktor	Summe	Buch
1	Beratung	Rechnung	Abrechnungsbetrieb	23.05.2025	1	4,66	M00	1,3	6,06	Standa
4382	Hepatitis A - Virus (IgG)	Rechnung	Abrechnungsbetrieb	23.05.2025	1	13,99	M00	1,15	16,09	Standa


Σ 22,15 €

Bereits abgerechnete Leistungen 51

Ziffer	Kürzel	Abrechnungsmodus	Rechnungsziel	Leistung-Datum	Steuer	Summe	Rechnung	Buch
4381	Hepatitis Bs - Antikörper	Rechnung	Abrechnungsbetrieb	23.05.2025	M00	16,09	2025/1010	Standa
4393	Hepatitis Bc - Antikörper	Rechnung	Abrechnungsbetrieb	23.05.2025	M00	20,11	2025/1010	Standa
4395	HIV - 1/2 Antikörper (ELISA)	Rechnung	Abrechnungsbetrieb	23.05.2025	M00	20,11	2025/1010	Standa
4406	Hepatitis C - Antikörper	Rechnung	Abrechnungsbetrieb	23.05.2025	M00	26,81	2025/1010	Standa

Ein **Betriebswechsel** [52] überträgt alle vorhandenen offenen, noch nicht abgerechneten Leistungen, die sich in der oberen Tabelle [50] befinden, auf den neuen Abrechnungsbetrieb [52] mit verknüpfter Berufsgenossenschaft und ggf. abweichendem **Buchungskreis** [53].

Die bereits abgerechneten Leistungen aus der unteren Tabelle [51] werden dadurch nicht bearbeitet, da diese bereits gebucht wurden.

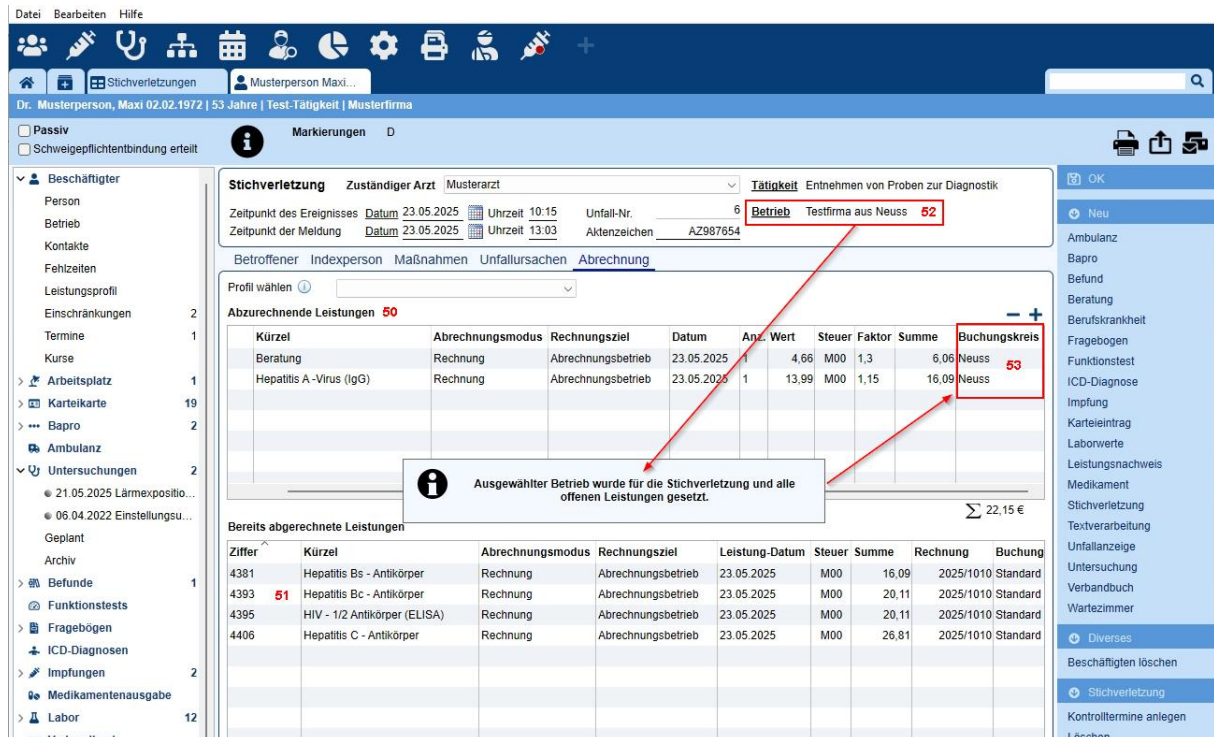

Stichverletzung Zuständiger Arzt Musterarzt **Tätigkeit** Entnehmen von Proben zur Diagnostik

Zeitpunkt des Ereignisses Datum 23.05.2025 Uhrzeit 10:15 Unfall-Nr. 6 **Betrieb** Testfirma aus Neuss 52

Zeitpunkt der Meldung Datum 23.05.2025 Uhrzeit 13:03 Aktenzeichen AZ987654

Betroffener Indexperson Maßnahmen Unfallursachen **Abrechnung**

Profil wählen

Abzurechnende Leistungen 50

Kürzel	Abrechnungsmodus	Rechnungsziel	Datum	Anz.	Wert	Steuer	Faktor	Summe	Buchungskreis
Beratung	Rechnung	Abrechnungsbetrieb	23.05.2025	1	4,66	M00	1,3	6,06	Neuss 53
Hepatitis A-Virus (IgG)	Rechnung	Abrechnungsbetrieb	23.05.2025	1	13,99	M00	1,15	16,09	Neuss 53


Bereits abgerechnete Leistungen

Ziffer	Kürzel	Abrechnungsmodus	Rechnungsziel	Leistungs-Datum	Steuer	Summe	Rechnung	Buchung
4381	Hepatitis Bs - Antikörper	Rechnung	Abrechnungsbetrieb	23.05.2025	M00	16,09	2025/1010	Standard
4393	Hepatitis Bc - Antikörper	Rechnung	Abrechnungsbetrieb	23.05.2025	M00	20,11	2025/1010	Standard
4395	HIV - 1/2 Antikörper (ELISA)	Rechnung	Abrechnungsbetrieb	23.05.2025	M00	20,11	2025/1010	Standard
4406	Hepatitis C - Antikörper	Rechnung	Abrechnungsbetrieb	23.05.2025	M00	26,81	2025/1010	Standard

Ausgewählter Betrieb wurde für die Stichverletzung und alle offenen Leistungen gesetzt.

Σ 22,15 €

Über die Beschäftigten-Navigation der Karteikarte [54] gelangen Sie zum **Fließtext** [55]. Dort sind die Eingaben zur Stichverletzung auf einer Seite zusammen dargestellt. Die dortigen Angaben zur Stichverletzung sind **exportierbar** [56], falls der Beschäftigte seine Akte ausgehändigt bekommen möchte oder es eine Aktenübergabe an einen anderen Arzt geben sollte.

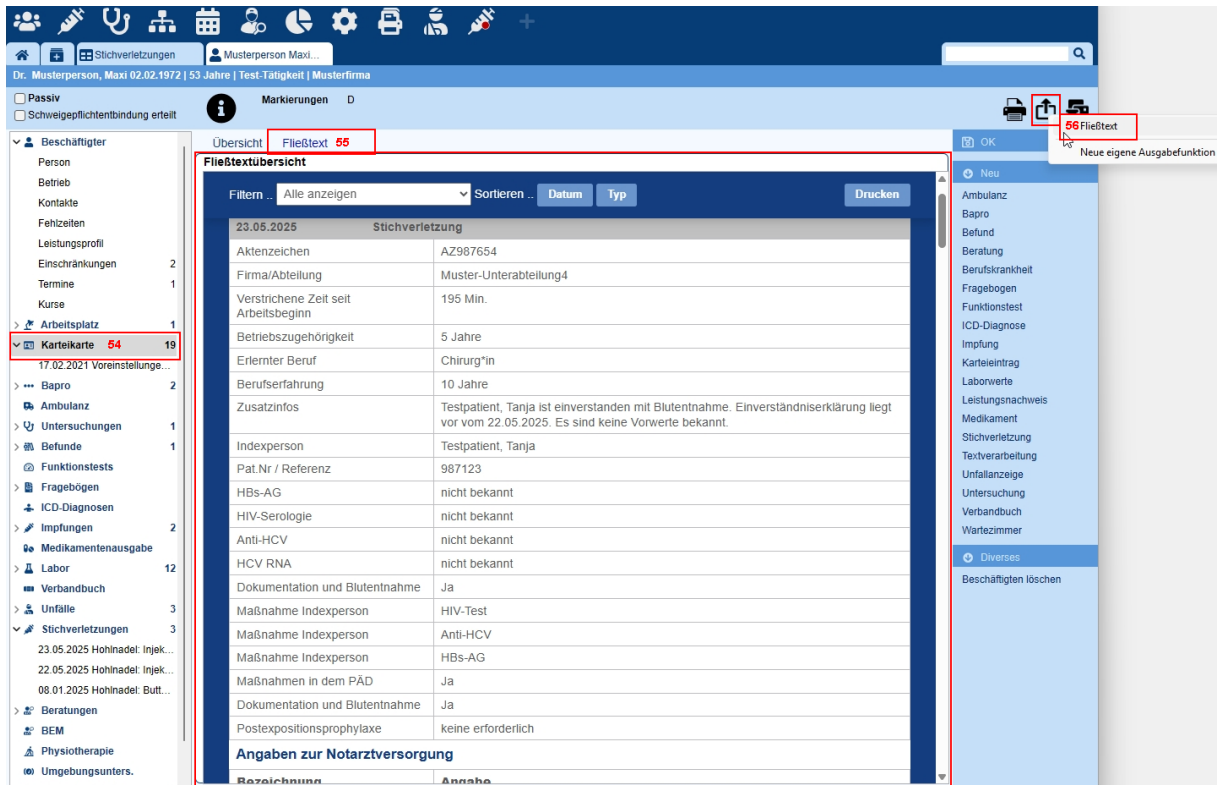


The screenshot displays the Medisoft software interface. On the left, a navigation tree shows the 'Karteikarte' (Employee Card) section expanded, with 'Arbeitsplatz' (Workplace) and 'Karteikarte 54' highlighted. The main window shows the 'Fließtext 55' overview for a 'Stichverletzung' (Puncture Injury) on 23.05.2025. The table below contains the following data:

Reihe	Bezeichnung	Angabe
1	Aktenzeichen	AZ987654
2	Firma/Abteilung	Muster-Unterabteilung4
3	Verstrichene Zeit seit Arbeitsbeginn	195 Min.
4	Betriebszugehörigkeit	5 Jahre
5	Erlerner Beruf	Chirurg*in
6	Berufserfahrung	10 Jahre
7	Zusatzinfos	Testpatient, Tanja ist einverstanden mit Blutentnahme. Einverständniserklärung liegt vor vom 22.05.2025. Es sind keine Vorwerte bekannt.
8	Indexperson	Testpatient, Tanja
9	Pat.Nr / Referenz	987123
10	HBS-AG	nicht bekannt
11	HIV-Serologie	nicht bekannt
12	Anti-HCV	nicht bekannt
13	HCV RNA	nicht bekannt
14	Dokumentation und Blutentnahme	Ja
15	Maßnahme Indexperson	HIV-Test
16	Maßnahme Indexperson	Anti-HCV
17	Maßnahme Indexperson	HBS-AG
18	Maßnahmen in dem PÄD	Ja
19	Dokumentation und Blutentnahme	Ja
20	Postexpositionsprophylaxe	keine erforderlich

Below the table, there is a section for 'Angaben zur Notarztversorgung' (Information for ambulance care) with a table structure for 'Bezeichnung' and 'Angabe'. On the right side of the interface, a menu is visible with options like 'Neu', 'Ambulanz', 'Bapros', 'Befunde', 'Beratung', 'Berufskrankheit', 'Fragebogen', 'Funktionstest', 'ICD-Diagnose', 'Impfung', 'Karteieintrag', 'Laborwerte', 'Leistungsnaehweis', 'Medikament', 'Stichverletzung', 'Textverarbeitung', 'Unfallanzeige', 'Untersuchung', 'Verbandbuch', 'Wartezimmer', 'Diverses', and 'Beschäftigten löschen'.

In den Voreinstellungen | Stichverletzungen [57] können Sie festlegen, dass **zeitgleich zu einer Stichverletzung auch eine Unfallanzeige** angelegt werden soll.

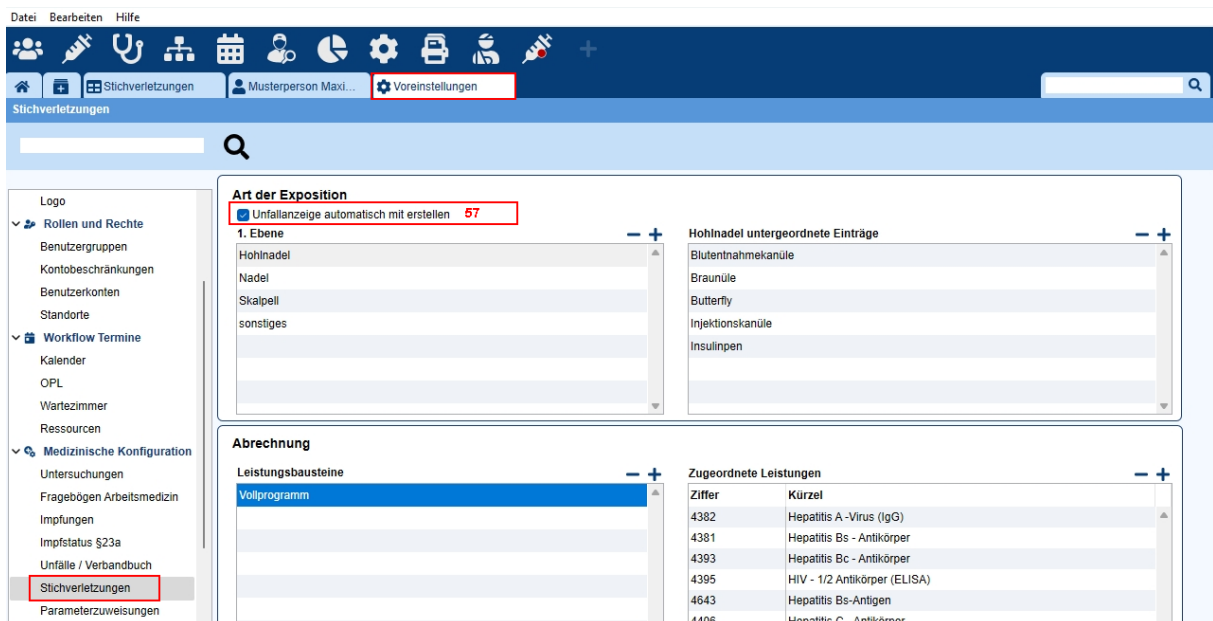

Art der Exposition

Unfallanzeige automatisch mit erstellen **57**


1. Ebene

Hohlnadel	Hohlnadel untergeordnete Einträge
Hohlnadel	Blutentnahmekanüle
Nadel	Braunüle
Skalpelli	Butterfly
sonstiges	Injektionskanüle
	Insulinen

Abrechnung

Leistungsbausteine	Zugeordnete Leistungen
Vollprogramm	Ziffer
	Kürzel
	4382 Hepatitis A - Virus (IgG)
	4381 Hepatitis Bs - Antikörper
	4393 Hepatitis Bc - Antikörper
	4395 HIV - 1/2 Antikörper (ELISA)
	4643 Hepatitis Bs-Antigen
	4406 Hepatitis C - Antikörper

Wenn **zeitgleich zu einer Stichverletzung auch eine Unfallanzeige** [58] angelegt wird, werden relevante Einträge der Stichverletzung [59] auch direkt in die neue Unfallanzeige übertragen, damit Sie keine Doppelseinträge machen müssen.

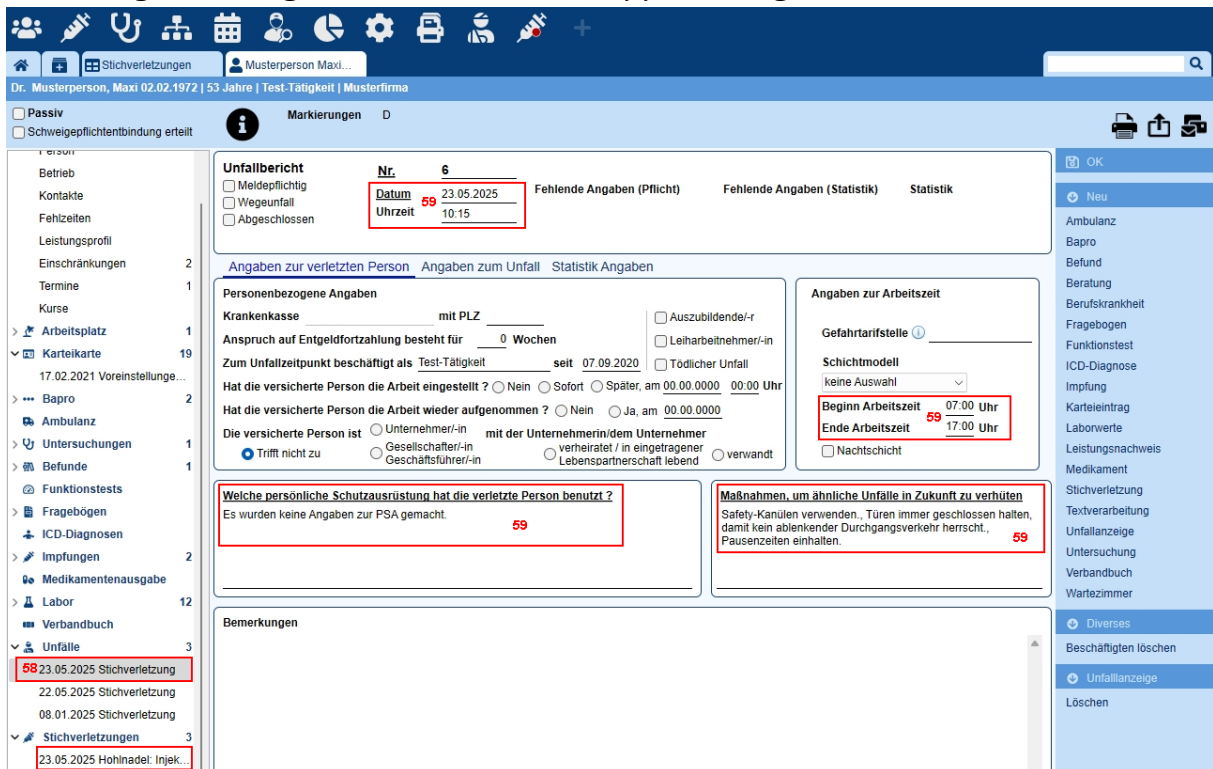

Unfallbericht

Nr. **6**

Datum **23.05.2025** Fehlende Angaben (Pflicht) Fehlende Angaben (Statistik) Statistik

Uhrzeit **10:15**

Angaben zur verletzten Person Angaben zum Unfall Statistik Angaben

Personenbezogene Angaben

Krankenkasse _____ mit PLZ _____ Auszubildende/-r

Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht für **0** Wochen Leiharbeitnehmer/-in

Zum Unfallzeitpunkt beschäftigt als Test-Tätigkeit seit **07.09.2020** Tödlicher Unfall

Hat die versicherte Person die Arbeit eingestellt? Nein Sofort Später, am **00.00.0000** **00:00** Uhr

Hat die versicherte Person die Arbeit wieder aufgenommen? Nein Ja, am **00.00.0000**

Die versicherte Person ist Unternehmer/-in mit der Unternehmerin/dem Unternehmer verheiratet / in eingetragener Partnerschaft lebend verwandt

Trifft nicht zu Geschäftsführer/-in Lebenspartner/-in

Angaben zur Arbeitszeit

Gefahrdarfstelle _____

Schichtmodell keine Auswahl

Beginn Arbeitszeit 07:00 Uhr

Ende Arbeitszeit 17:00 Uhr

Nachtschicht

Welche persönliche Schutzausrüstung hat die verletzte Person benutzt?

Es wurden keine Angaben zur PSA gemacht. **59**

Maßnahmen, um ähnliche Unfälle in Zukunft zu verhüten

Safety-Kanülen verwenden, Türen immer geschlossen halten, damit kein ablenkender Durchgangsverkehr herrscht, Pausenzeiten einhalten. **59**

Bemerkungen

58 23.05.2025 Stichverletzung


22.05.2025 Stichverletzung

08.01.2025 Stichverletzung

Stichverletzungen 3

23.05.2025 Hohlnadel. Injek...

Wenn **zeitgleich zu einer Stichverletzung auch eine Unfallanzeige [58]** angelegt wird, werden nicht nur relevante Einträge der Stichverletzung [59] direkt in die neue Unfallanzeige übertragen. Von der Unfallanzeige wird die in der **Unfallanzeige vergebene Unfall-Nummer [60]** auch in der Stichverletzung sichtbar.

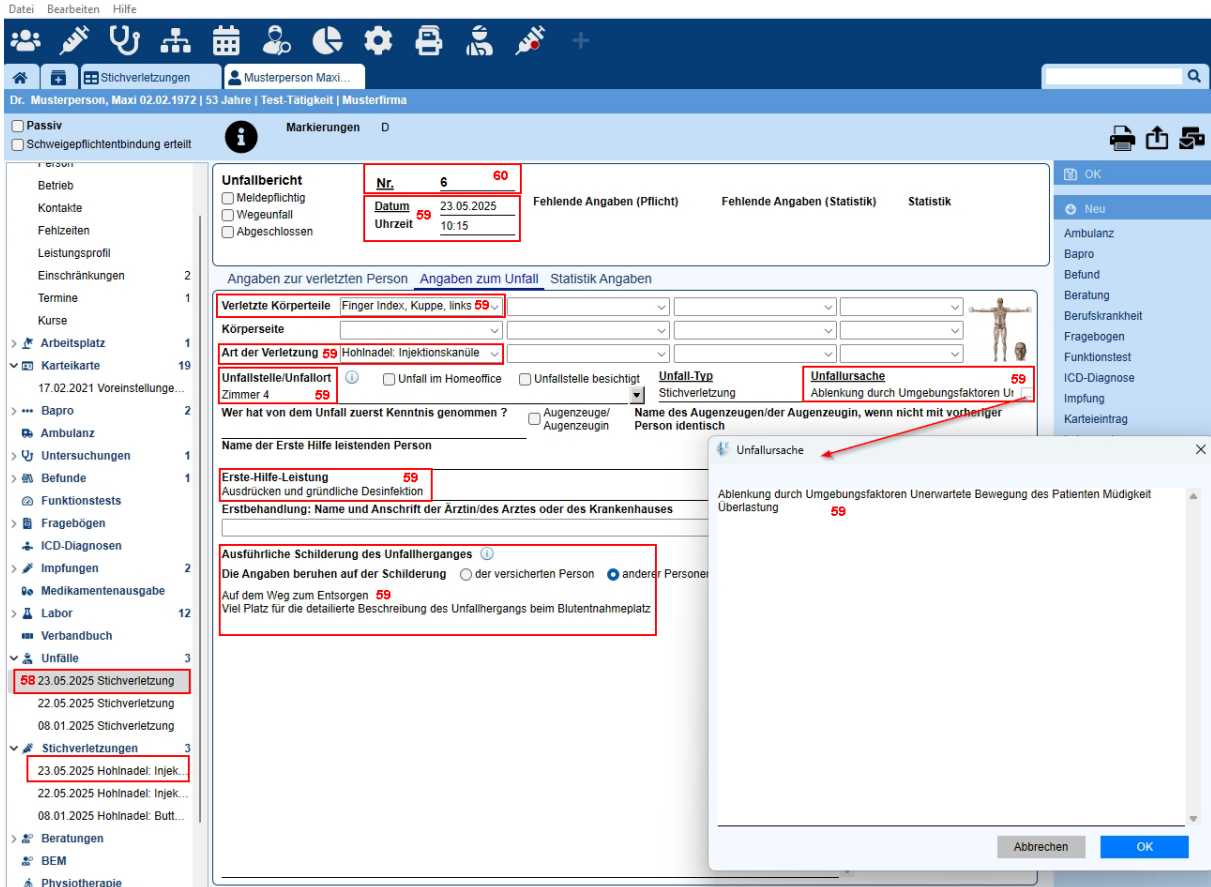

The screenshot shows the Medisoft software interface. The main window displays a 'Stichverletzung' record for 'Musterperson Maxi...'. The 'Unfallbericht' section shows the following data:

- Nr. 6 60
- Datum 23.05.2025
- Uhrzeit 10:15

The 'Angaben zur verletzten Person' section shows:

- Verletzte Körperteile: Finger Index, Kuppe, links
- Körperseite: [empty]
- Art der Verletzung: Hohlnadel: Injektionskanüle
- Unfallstelle/Unfallort: Zimmer 4
- Unfall-Typ: Stichverletzung
- Unfallursache: Ablenkung durch Umgebungsfaktoren U...

The 'Erste-Hilfe-Leistung' section shows:

- Erste-Hilfe-Leistung: 59
- Ausdrücken und gründliche Desinfektion
- Erstbehandlung: Name und Anschrift der Ärztin/des Arztes oder des Krankenhauses

The 'Ausführliche Schilderung des Unfallherganges' section shows:

- Auf dem Weg zum Entsorgen
- Viel Platz für die detaillierte Beschreibung des Unfallherganges beim Blutentnahmeplatz.

A pop-up window titled 'Unfallursache' is open, showing the cause: 'Ablenkung durch Umgebungsfaktoren Unerwartete Bewegung des Patienten Müdigkeit Überlastung'.

ACHTUNG !

Denken Sie daran, die übertragenen Eingaben in der Unfallanzeige bei Bedarf zu korrigieren oder zu ergänzen.



The screenshot shows a summary of the 'Stichverletzung' record. The 'Zuständiger Arzt' is 'Musterarzt' and the 'Tätigkeit' is 'Entnehmen von Proben zur Diagnostik'. The 'Zeitpunkt des Ereignisses' is 'Datum 23.05.2025' and 'Uhrzeit 10:15'. The 'Unfall-Nr.' is 60 6. The 'Betrieb' is 'Testfirma aus Neuss'. The 'Zeitpunkt der Meldung' is 'Datum 23.05.2025' and 'Uhrzeit 13:03'. The 'Aktenzeichen' is 'AZ987654'.


The 'Betroffener' section shows:

- Angaben zur Notarztversorgung: Erstversorgung Notaufnahme, Datum 23.05.2025, Uhrzeit 10:30, Patientenummer Notaufnahme 59876A
- Angaben zur Arbeitszeit: Beginn Arbeitszeit 07:00 Uhr, Ende Arbeitszeit 17:00 Uhr, Verstrichene Zeit seit Arbeitsbeginn 195 Min.
- Angaben zum Beruf: Erlernter Beruf Chirurg*in, Berufserfahrung 10 Jahre, Betriebszugehörigkeit 5 Jahre

Die **Übersichtliste Stichverletzungen** [61] gibt Ihnen einen Überblick über alle bisher dokumentierten Stichverletzungen. Hier können Sie **Filtern und Suchen** [62], sich **Mengen** zusammenstellen [63] und diese später wieder aufrufen.

Die angezeigten Spalten können Sie sich über die **Favoriten-Funktion** [64] selbst zusammenstellen.

Die Inhalte der Übersichtsliste können Sie als **Excelliste exportieren** [65] und extern statistisch auswerten.

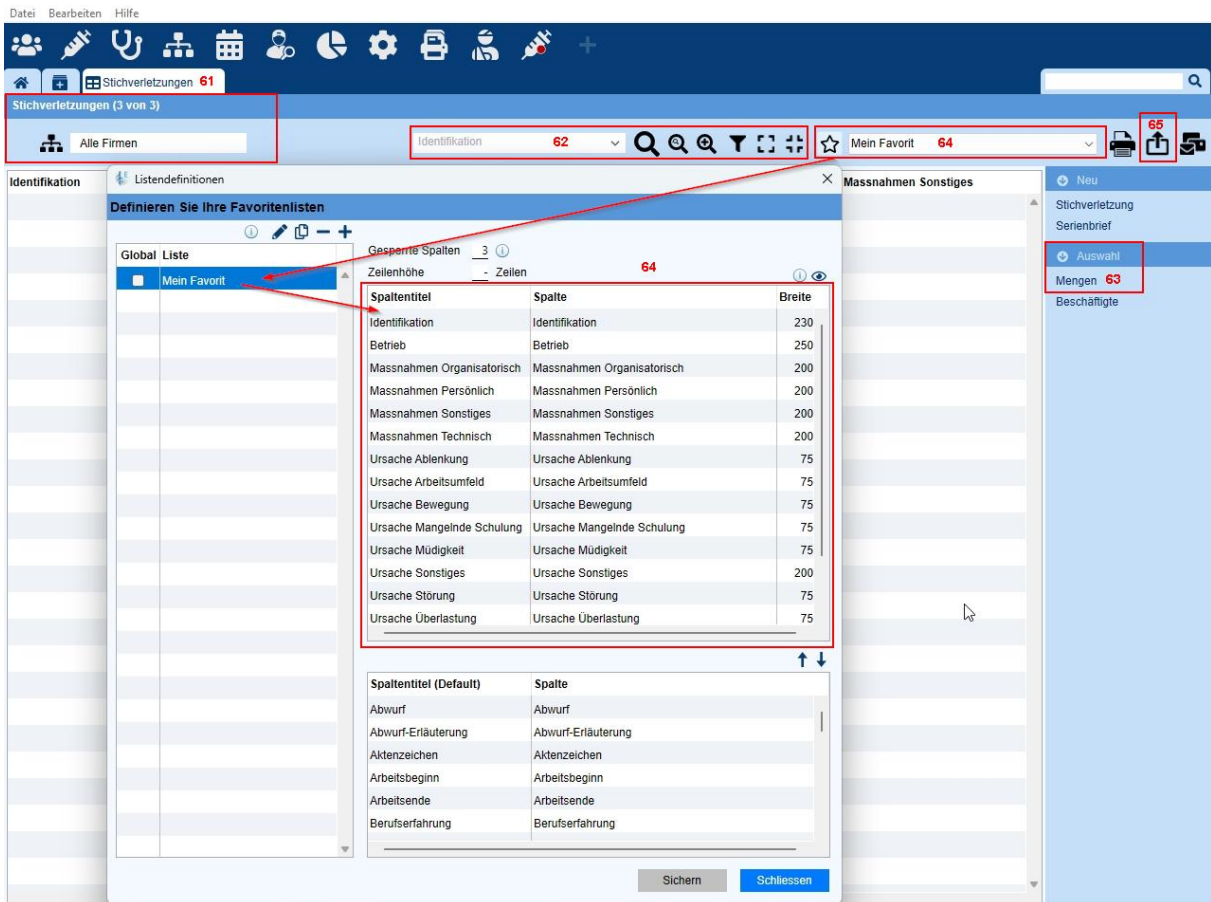

The screenshot shows the Medisoft software interface. At the top, there is a menu bar with 'Datei', 'Bearbeiten', and 'Hilfe'. Below it is a toolbar with various icons. The main window displays 'Stichverletzungen (3 von 3)' with a search bar and a filter dropdown set to 'Identifikation'. A 'Mein Favorit' dropdown is also visible. A dialog box titled 'Definieren Sie Ihre Favoritenlisten' is open, showing a table of columns to be included in the favorite list. The table has three columns: 'Spaltentitel', 'Spalte', and 'Breite'. The 'Mein Favorit' list is currently empty. The dialog box also has a 'Sichern' button and a 'Schliessen' button.

Spaltentitel	Spalte	Breite
Identifikation	Identifikation	230
Betrieb	Betrieb	250
Massnahmen Organisatorisch	Massnahmen Organisatorisch	200
Massnahmen Persönlich	Massnahmen Persönlich	200
Massnahmen Sonstiges	Massnahmen Sonstiges	200
Massnahmen Technisch	Massnahmen Technisch	200
Ursache Ablenkung	Ursache Ablenkung	75
Ursache Arbeitsumfeld	Ursache Arbeitsumfeld	75
Ursache Bewegung	Ursache Bewegung	75
Ursache Mangelnde Schulung	Ursache Mangelnde Schulung	75
Ursache Müdigkeit	Ursache Müdigkeit	75
Ursache Sonstiges	Ursache Sonstiges	200
Ursache Störung	Ursache Störung	75
Ursache Überlastung	Ursache Überlastung	75

ACHTUNG !

Denken Sie daran, Ihre Favoriten-Einstellungen zu sichern, wenn Sie diese erneut verwenden möchten.